

6Frガイディングor中間カテーテルを シェイピングする際のアイデア

埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科
神山信也 新井良太

連絡先：sk3821@5931.saitama-med.ac.jp


6 FrガイディングサイズのFUBUKI 4Fr DKを使う際、
先端のシェイピングをしたくなかったがマンドリルがない(⊘)

4.2Fr FUBUKIなどについているマンドリルを使用したか、細いマンドリルなので
内腔が潰れたり、カテ先がくちばし状になる ◆ (⊘)

ホームセンターで買ったアルミの針金が役に立ちました！(⊘)



10cm程度に切断し、両端をヤスリで丸めて（2、3分の作業）滅菌する。

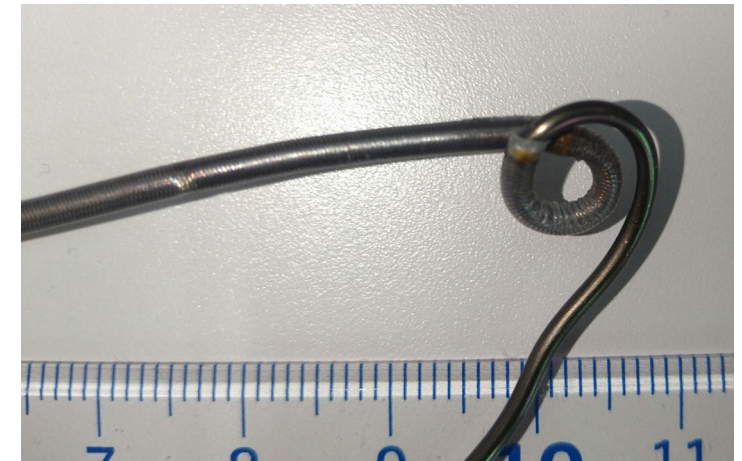

SofiaやNavienでも使用可能。多分DD6も。
（写真はSofia 6Fr）

アルミなので柔らかく、形状付けが簡単。何度も滅菌しなおして使用できます！